

DSA 2000 L

DSA 2000 L

Dental Stand Alone



Eine Steckdose genügt ...



Das Kernstück des DSA
Behandlungskonzeptes
bildet das DSA 2000 L
Behandlungsgerät mit
eingebautem Kom-
pressor und integrierter
Wasserversorgung.




DSA, ein Konzept, das bis ins Detail überzeugt!

Mit dem DSA 2000 L können wir Ihnen einen Behandlungsplatz präsentieren, für den keine einzige Versorgungsleitung gelegt werden muß.

Unabhängig davon, ob Sie Rechts- oder Linksaufstellung bevorzugen, können Sie Ihr Gerät – Ihrer Arbeitsweise entsprechend – so aufstellen, wie Sie es sich wünschen. Ganz gleich ob Sie sich für eine Absaugung mit oder ohne Trichter entscheiden, ob fahrbar oder Hinterkopf montiert, hier finden Sie die richtige Lösung.

Qualität des Kühlmittels

Beim DSA 2000 L sorgen zwei Wassertanks mit je 2 L Inhalt, herausnehmbar und autoklavierbar, für die Versorgung mit Kühlflüssigkeit. Sie können Leitungswasser mit einem Zusatz von „Alpron“ verwenden, um höchste Wasserqualität zu erreichen, destilliertes Wasser, oder Kochsalzlösung. Wählen Sie die Qualität des Kühlmittels selbst, und ärgern Sie sich nicht über verstopfte Instrumentenöffnungen. Das Kühlsystem Ihres DSA 2000 L-Gerätes kann nicht verschmutzen, es ist von innen sauber.

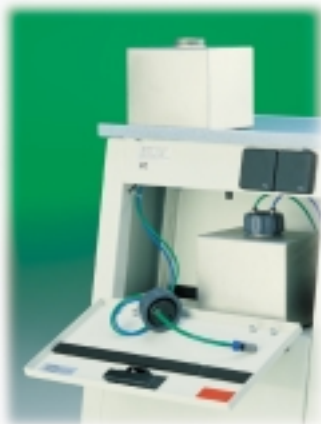

Durch die Verwendung des „No-Retraktion-Systems“ ist kein Rückzug des Kühlmittels nach Beendigung des Bohrens mehr möglich. Die Kühlluft bläst nach, und verhindert so das Eindringen von Bakterien.

Chirurgie

Für die Chirurgen wurde die Möglichkeit geschaffen, die Kühlluft abzuschalten und den Kühlwasserstrahl (Kochsalzlösung) extern zu führen, um den Kühlstrahl durch den Bohrer leiten zu können.




Hygiene

Die Konstrukteure Ihres DSA 2000 L haben, zugunsten einer schnellen und hygienischen Reinigung Ihres Gerätes darauf geachtet, möglichst glatte und große Flächen zu bilden. Die sehr glatte und fugen-

freie Oberfläche aus Corian erlaubt Ihnen eine großzügige Ablage Ihrer Geräte und Instrumente. In die wasserundurchlässige, kratz- und schlagfeste Corianplatte sind die Instrumentenköcher direkt integriert. Keine Schalter, Drucktasten oder Folienschalter auf der Oberfläche behindern Desinfektion und Reinigung.

Einfache Bedienung

Die Steuerung Ihres DSA 2000 L erfolgt an den Instrumenten und über den Fußanlasser. Spray, Chipblower, Linkslauf und die Geschwindigkeit regulieren Sie über den Fußanlasser.

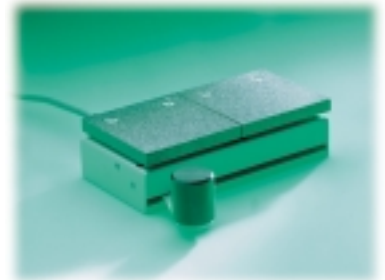

Technische Qualität

Sowohl bei der Konstruktion des Gerätes DSA 2000 L als auch bei der Auswahl der Bauteile und Instrumente wurde ausschließlich auf Langlebigkeit Wert gelegt. So steht Ihnen mit Ihrem DSA 2000 L ein Gerät zur Verfügung an dem Sie lange Spaß und wenig Reparaturen haben werden. An der Rückseite des Gerätes finden Sie 2 elektrische Steckdosen, sowie an der Unterseite die Anschlüsse für Wasser und Luft zum Betrieb externer Geräte.

OP-Stuhl Linda 3 und OP-Stuhl Eco 19

Beide OP-Stühle passen sehr gut in das DSA-Konzept. Der Linda 3 OP-Stuhl mit abgewinkelter Fußbank erlaubt jedem Patienten den einfacheren Einstieg



von vorne. Beim Abklappen der Rückenlehne bewegt sich die Fußbank nach oben, so daß die Füße immer richtig liegen.

Er eignet sich sehr gut auch für kleine Sprechzimmer. Auf der Arztseite ist ein Durchlauf des Patienten nicht notwendig.

Der OP-Stuhl Eco 19 dagegen stellt die klassische Form der Behandlungsstühle dar. Die formschön durchgezogene Fußbank ermöglicht dem Patienten einen angenehmen Aufenthalt im OP-Stuhl. Die Rückenlehne wird beim Hochfahren nach oben geschoben, so daß jeder Auszieheffekt unterbleibt.

Beide OP-Stühle werden über eine Fußsteuerung betrieben. 0-Programm, Lastposition und 3 Arbeitspro-

gramme sind bereits vorhanden. Die Kopfstütze mit Magnetkopfpolster ist sehr beliebt auch bei Kindern. Der Linda 3 OP-Stuhl wird mit 2 Armlehnen geliefert, beim Eco 19 OP-Stuhl ist dies optional gegen Aufpreis möglich.



Saugsystem

Wählen Sie unser Aspi-Jet Absauggerät mit Corianplatte, so ist dort nicht nur die Saugmaschine integriert, sondern auch ein 6 L Behälter mit Separierung. Die Leerung des Behälters kann über Amalgamabscheider erfolgen. Oder wünschen Sie Hinterkopfabsaugung mit Saugmaschine oder Amalgamabscheider im Waschbeckenschrank? Wir beraten Sie gerne.

OP-Leuchte

Unser OP-Leuchte kann auf Wunsch links am OP-Stuhl befestigt werden. Sie läuft dadurch mit dem Stuhl auf und ab. Im Adapter sind ferner 2 Steckdosen für Ihr DSA 2000 L oder Ihr Aspi-Jet vorgesehen.

DSA-2000 L, ein Konzept das überzeugt – eine Steckdose genügt.

Das DSA-Behandlungskonzept wurde konstruiert

- für Zahnärzte, die ein flexibles, mobiles System bevorzugen
- für Zahnärzte, die sowohl rechts- als auch linkshändig arbeiten wollen
- für Zahnärzte, die höchste Anforderungen an die Qualität des Kühlmittels stellen
- für Zahnärzte, die höchste Anforderungen an die Hygiene stellen
- für Zahnärzte, die einfache Bedienung und trotzdem beste Qualität fordern.
- für Zahnärzte, die technische Qualität eines Gerätes zu schätzen wissen.
- für Zahnärzte, die nicht viele Versorgungsleitungen verlegen wollen.
- für Chirurgen, die dies zu schätzen wissen, und durch den Bohrer kühlen wollen.

HI-DENT GmbH Dentalgeräte
Weigelwerkstraße 10 · 45326 Essen
Telefon: 02 01 / 36 197 14
Telefax: 02 01 / 36 197 16
Internet: <http://www.hident.de>
E-Mail: info@hident.de

HI-DENT  GmbH Dentalgeräte

DSA = Dental Stand Alone ist ein eingetragenes Warenzeichen
DSA 2000 L wird hergestellt von Dental International, Niederlande